


移動式免疫蛍光分析置 STANDARD F アナライザシリーズ

STANDARD F200
STANDARD F2400

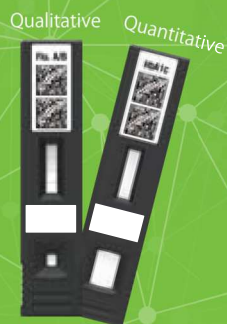

STANDARDTM
The Global Standard Founder

STANDARD F

移動式免疫蛍光分析装置

STANDARD Fアナライザはイムノアッセイシステムを用いた蛍光免疫測定システムです。複数の検査項目を測定し、検査結果を提供します。

特徴

蛍光免疫測定法 (FIA)



測定対象に対し、特異的な抗原又は抗体を使用

- ・ 高い感度と特異度
- ・ 短時間で結果判定可能
- ・ 高い費用対効果



ユーロピウムビーズを使用

- ・ 強い発光
- ・ 高い安定性
- ・ 少ない干渉



2Dバーコードを使用

- ・ テストデバイスに応じたパラメータを自動設定




ランダムアクセス(F2400のみ)

STANDARD F2400では、テストデバイスの連続挿入が可能です。テストデバイスの種類や挿入順に関わらず、各項目に適切なパラメータで自動測定が行われるため、スピーディーな測定が可能です。



患者 ID プリントシステム

テストデバイスに手書きした患者ID等の情報も検査結果と共に印刷されます。

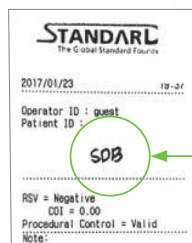

外部接続

LIS/HIS接続

既存のシステムに接続します

データシェア

クラウドサーバー経由で可能です

PC接続

PCと直接ケーブルをつなぎ接続できます



COI値表示

STANDARD Fは定性検査時にテストラインの色濃度から、COI値を表示します。
テストラインの色濃度は検査対象項目の濃度に応じて変化するので、COI値の変化を追うことで
治療効果の確認等の指標とすることができます。



STANDARD

d-BLOCK インキュベーター オプション



専用インキュベータは、簡単かつ確実な測定に必要な装置です。（VitaminD測定時）



測定手順 (F200)

標準測定モード

単独検体の自動測定モード（1テスト）



読み取り専用モード

複数検体測定時の高速処理モード



STANDARD

d-BLOCK Incubator オプション

CE

専用インキュベータは、簡単かつ確実な測定に必要な装置です。（VitaminD測定時）



製品概要

STANDARD
F2400

CE MFD

STANDARD
F200

CE MFD

連続挿入可能で最大70テスト/時間の検査が可能



置場を選ばないコンパクトタイプ



製品仕様

形式	STANDARD™ F2400	STANDARD™ F200
一般的名称	移動式免疫蛍光分析装置	
分類	一般医療機器（クラスⅠ）	
届出番号	届出番号13B3X10176000007	届出番号13B3X10176000006
測定原理	蛍光免疫測定法（FIA）	
測定結果	定性 / 定量	
検査時間※	70テスト/時間	1テスト・時間
テストモード	標準モード	標準モード、読み取り専用モード
電源	AC/DCアダプタ	
表示・操作部	10.1" カラータッチパネル	7" カラータッチパネル
プリンター	内蔵	
接続	HL7 v2.6(PCD-01) / POCT1-A	
パラメーター	2次元バーコード	
オプション	キーボード / バーコードスキャナー	
寸法	510 x 566 x 297 mm	214.9 x 261 x 203 mm
重量	20.0 kg	2.5 kg

※検査時間は測定対象により異なります

製造元

SD BIOSENSOR

C-4&5Floor, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Tel +82-31-300-0400 | Fax +82-31-300-0499

輸入販売元

株式会社 マルコム

〒151-0071
東京都渋谷区本町4-15-10
e-mail: mdinfo@malcom.co.jp
URL: http://www.malcom.co.jp

製品に関するお問い合わせ先
マルコム コールセンター
0120-901-656
9:00~17:00 土日祝日を除く

20240305